


G.A.M.A.[®]
ITALY PROFESSIONAL

PEELING ULTRASÓNICO FACIAL

Recompone la piel dejando
un rostro más joven y suave



- ★ Limpieza de poros y exfoliación profunda
- ★ Limpia y disminuye el acné, arrugas y manchas del rostro

INSTRUCCIONES DE USO

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO Y CONSÉRVELO EN UN LUGAR SEGURO

DETALLE



FUNCIONAMIENTO




A: Presione y mantenga apretado el botón ON/OFF para corroborar que el aplicador esté trabajando. Normalmente entrará en el modo de Onda Continua, y el indicador se iluminará.


B: Al enchufarlo para la carga, el indicador parpadeará mostrando que está en proceso de carga. En cuanto la luz del indicador se apague, la batería está completamente cargada.

MODO DE USO

1. Encienda el producto, elija la función de limpieza.
2. El cabezal debe hacer contacto con la piel en un ángulo de 45°, con el lado cóncavo hacia arriba para limpiar profundamente la suciedad de los poros luego de aplicar productos de limpieza facial.

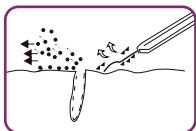

1. Su tecnología ultrasónica que vibra 165 millones de veces por segundo para lograr un ejercicio de las células.
Promueve el aumento de metabolismo y la microcirculación celular incrementando la suavidad de la piel.

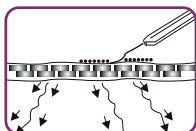

2. Tras un intercambio de iones, mejora la permeabilidad de la piel, favoreciendo la absorción de productos de tratamiento y la hidratación de cutis.

Para el uso diario

Limpieza profunda

Utilizando el producto en un ángulo de 45° se acelera el metabolismo de las células epidérmicas y renuevan su proceso de regeneración, incrementa el intercambio de las células epidérmicas restaurando la elasticidad de la piel y llevándola a un estado suave y delicado.

Nutrición y activación de la piel

Adoptando la vibración ultrasónica, se promueve la circulación de la sangre dentro de la dermis, acelerando la descarga de toxinas acumuladas en las partes más profundas de la piel y eliminando las células muertas. De esta forma se promueve la acumulación de humedad para una nutrición celular mayor. Esto refuerza la absorción de productos de cuidado de la piel.

Tratamiento para el Acné

A través de la vibración ultrasónica, se favorece la limpieza del acné en el poro

ADVERTENCIAS

1. En modo ultrasónico, utilice con agua o con otros líquidos.
2. Antes y después de utilizarlo, mantenga seco el aparato.
3. No utilizar el aparato cerca de los ojos o piel lastimada.
4. Mujeres embarazadas no deben usar este producto.
5. Mantenga el aparato alejado de los niños
6. No utilice el aparato con las manos mojadas
7. Limpie el cabezal con un paño húmedo luego de cada uso. No limpie ni lave el producto con bencinas o productos químicos.


G.A.M.A.[®]
ITALY PROFESSIONAL

*skin
care*

by **G.A.M.A.**[®]
ITALY PROFESSIONAL

PEELING ULTRASÓNICO FACIAL

Recompone la piel dejando
un rostro más joven y suave



Limpiador de piel
C114C



Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com

MPAKM0000000998-RV00