

Personal SCALES

GLASS ELECTRONIC DELUXE



Tecnología digital



Precisión, peso exacto



Cuida tu salud

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este instructivo
antes de usar el producto
y consérvelo

NO APTO PARA USO COMERCIAL


GAMA
ITALY PROFESSIONAL




Modelo: SCG-430

Especificaciones del producto

1. Capacidad: 180 kg
2. Resolución: 0,1 kg
3. Batería: 1 x CR2032
4. Dimensiones: 300 x 300 x 18 mm
5. Tamaño de la pantalla LCD: 74 x 30 mm

Antes de utilizar la balanza

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Abra la tapa del compartimiento de la batería, coloque una batería CR2032 y cierre el compartimiento o bien, simplemente, quite la cinta aislante.

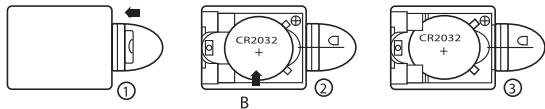

3. Apoye la balanza en el piso, cuya superficie debe estar a nivel para permitir un funcionamiento adecuado.
4. Para quitar la batería con facilidad, presione en la posición C.

Pesaje

Antes de utilizar la balanza por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Apoye la balanza sobre una superficie plana y horizontal, que no sea blanda. Esta condición es obligatoria ya que permite obtener resultados exactos. Encienda la balanza con la ayuda del pie. Apoye el pie sobre la balanza y se encenderá la pantalla como muestra la siguiente imagen.



2. La unidad predeterminada de fábrica es el kilogramo.
3. Permanezca sobre la balanza.



4. En la pantalla LCD se visualizará su peso, tal como se muestra en la siguiente imagen.



La balanza se apagará automáticamente cuando hayan transcurridos 10 segundos sin utilizarla.

NOTA

1. Si la balanza se encuentra en condiciones de inestabilidad, aparecerá la letra "C". Eso significa que el peso en la pantalla no es el peso real y que usted deberá pesarse nuevamente.



2. Si se sube a la balanza un exceso de peso, aparecerá el mensaje de error "ERR" (cuando se superen los 180 kg).



3. Si la batería tiene poca carga y debe remplazarse, en la pantalla aparecerá el mensaje "Lo".



IMPORTANTE

1. La balanza que usted ha adquirido es un instrumento electrónico muy exacto y contiene un sensor de precisión. Manténgala lejos del agua y evite que sufra golpes y caídas.
2. Remplace a tiempo la batería si ésta tiene poca carga.



ADVERTENCIA

1. Mantenga la balanza lejos del agua.



2. Trate la balanza con cuidado.



3. No la apoye sobre una superficie irregular cuando esté pesando.



4. No se pare sobre el borde de la plataforma.

5. No suba a la balanza con los pies mojados.
6. No utilice la balanza cuando existan interferencias electromagnéticas.
7. Si no va a utilizar la balanza por un tiempo prolongado, quite la batería.
8. No intente abrir la balanza ni quitar ningún componente. La balanza debe ser reparada solo por técnicos calificados.

GAMA[®]
ITALY PROFESSIONAL

