



GA.MA[®]
ITALY PROFESSIONAL




MASAJEADOR LED ULTRASÓNICO

- ★ Limpieza profunda de poros
- ★ Disminuye el rojo de la piel
- ★ Rostro más suave

INSTRUCCIONES DE USO

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSÉRVELO EN UN LUGAR SEGURO

COMPONENTES

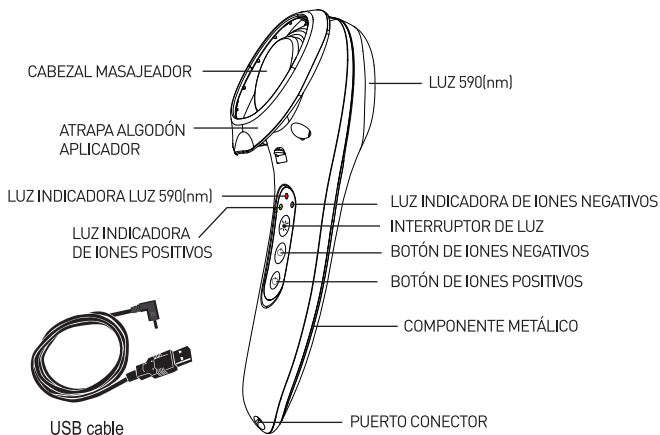

CARACTERÍSTICAS

1. Combina 3 tecnologías en un solo dispositivo: limpia profundamente la piel, promueve absorción de nutrientes y mantiene un aspecto joven en la piel.

Elimina impurezas:

masajes acústicos con emisión de iones positivos y vibraciones suaves eliminan la suciedad de los poros y permiten un mantenimiento de la piel limpia por más tiempo.

Promueve absorción de nutrientes:

masajes acústicos con emisión de iones negativos y vibraciones suaves ayudan a maximizar los efectos de protección de productos de cuidado de la piel.

Fototerapia- Luz naranja (590nm):

Activa las células, renueva el colágeno y retarda el envejecimiento de la piel.

2. Dos modos de uso (continuo/intermitente)

3. Dos sistemas de auto-cálculo del tiempo, 5 minutos para la corriente galvánica y vibración suave y 10 minutos para fototerapia.

4. Apto para todo tipo de piel

5. Recargable por USB

MODO DE USO

¿Cómo cargar la batería?

1. Conecte el cable USB en el puerto del aparato y conéctelo a una computadora

2. El indicador luminoso se tornará rojo durante la carga, y luego cambiará a azul cuando esté completamente cargado.

Toma solamente 4 horas recargar el aparato. El dispositivo tiene un tiempo operativo de 2 horas con una carga completa.

Presione el interruptor lon- /lon+/Fototerapia para comenzar cada función respectivamente. Presione el interruptor una segunda vez para cambiar el modo en el que el aparato esta trabajando de continuo a intermitente. Presione el interruptor una tercera vez para apagarlo, o espere a que el aparato se apague automáticamente.

Pasos para el uso diario

Paso 1: Los iones negativos eliminan las impurezas con una limpieza profunda. Coloque un algodón al cabezal aplicador. Aplique loción facial en su rostro, tome el aparato y toque el componente metálico. Presione el interruptor lon-.


Coloque el cabezal masajeador en su rostro y masajee por 5 minutos de mejilla a mejilla, de arriba hacia abajo, para una exfoliación más profunda.

Paso 2: Los iones positivos exportan elementos nutritivos para una más profunda absorción. Aplique los productos de cuidado de la piel de forma uniforme sobre su rostro, sostenga el aparato, toque el componente metálico. Presione el interruptor lon+.

Coloque el cabezal masajeador en su rostro y masajee por 5 minutos de mejilla a mejilla, de arriba hacia abajo, para una mayor absorción de nutrientes.

Paso 3: Fototerapia

Presione el interruptor de la luz para iniciar la Fototerapia de 590 luces. Sostenga el aparato y apunte la luz a una distancia de 10mm. Mueva la luz por 10 minutos de lado a lado. Se recomienda un uso de dos o tres veces por semana y los resultados se podran ver a partir de 3 meses de uso continuo. Utilice antes de dormir.

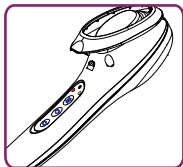

Limpieza

Limpie el cabezal masajeador y la unidad principal con un paño suave luego de cada uso.

No lave el aparato con agua.

PRECAUCIONES

1. Mujeres embarazadas y personas con quemaduras o acné severo no deben usar este producto.
2. El componente principal de este producto no es resistente al agua, por eso no lave el producto con ningún tipo de líquido.
3. Mantenga alejado del calor y la humedad.
4. Mantenga alejado el dispositivo del alcance de los niños.
5. No desarme el producto.


G.A.M.A.[®]
ITALY PROFESSIONAL

*skin
care*

by **G.A.M.A.**[®]
ITALY PROFESSIONAL

MASAJEADOR
LED
ULTRASÓNICO



- ★ Limpieza profunda de poros
- ★ Disminuye el rojo de la piel
- ★ Rostro más suave

Masajeador/Estimulador
TB-1385



Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com

MPAKM0000000999 - RV00