



GA.MA[®]

ITALY PROFESSIONAL

CLEANING ION




- ★ **Iones Positivos**
Limpieza profunda de poros
- ★ **Iones Negativos**
Fortalece la barrera natural de la absorción de la piel

INSTRUCCIONES DE USO

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSÉRVELO EN UN LUGAR SEGURO

COMPONENTES

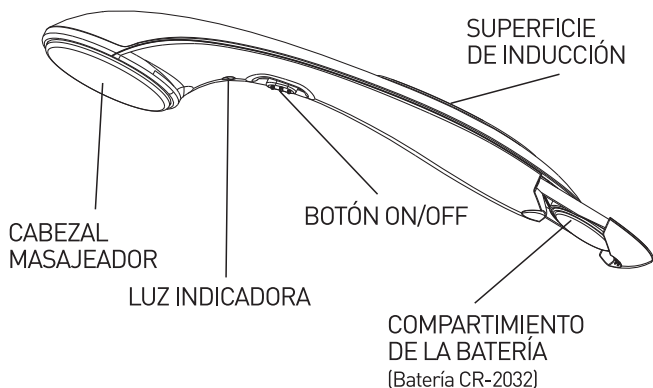

CARACTERÍSTICAS

La vibración y emisión de iones positivos absorben la suciedad residual de los poros y dejan la piel limpia.

La vibración con emisión de iones negativos ayuda a la incorporación de nutrientes para mantener la elasticidad y vigor de las células de la piel.

Masajea la superficie de la piel acelerando el movimiento celular y metabolismo para una piel fresca. Favorece la absorción de productos de cuidado de la piel.

MODO DE USO

1. Limpie la piel.
2. Aplique el masajeador sobre el rostro, la vibración de alta frecuencia sirve para aumentar la energía de las células y su metabolismo.
3. Utilice la función de iones Positivos de arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera para remover la suciedad de los poros.
4. Utilice la función de iones Negativos de arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera para un suavizado de la piel, favoreciendo la absorción profunda de productos de cuidado de la piel.

Indicadores de emisión iónica



Luz roja indica iones positivos



Luz verde indica iones negativos

PRECAUCIONES

- No desarme ni modifique el producto
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.
- No exponga el producto a altas temperaturas y evite el rayo de sol directo.
- Retire las baterías si no lo usará durante un largo período de tiempo.




G.A.M.A.[®]
ITALY PROFESSIONAL

*skin
care*

by **G.A.M.A.**[®]
ITALY PROFESSIONAL

**CLEANING
ION**



Masajeador facial
por emisión de iones
SK-1026



Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com

MPAKM0000001001 - RV00